



Lumencor SPECTRA Light Engine[®] Instruction Manual





Emissions Certifications

This equipment has been tested and found to comply with the limits of EMC directive 2004/108/EC. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Safety Certifications

2006/95/EC

CB Scheme

CE Declaration of Conformity

TUV NRTL Listing

TUV Canadian Listing

TUV European License

Table of Contents

- 1 Introduction**
- 2 Precautions and Warnings**
- 3 Installation and Operating Instructions**
- 4 Spectral Output**
- 5 Routine Maintenance and Trouble Shooting**
- 6 Customer Support**
- 7 Product Specifications**
- 8 Connectors**
- 9 Declaration of Conformance**
- 10 Warranty**



1. Introduction

The Lumencor SPECTRA family of light engines (SPECTRA, SPECTRA S and SPECTRAX) are designed for laboratory use by bioanalytical researchers and/or developers of life science instrumentation. The SPECTRA (all models) provides 3, 4, 5, 6 or 7 spectrally discrete, bright, controllable light outputs directly to a sample; or in the case of fluorescence microscopy, to the objective. Each of the colors is produced by an independent module that has been optimized to produce a precise set of wavelengths.

This manual covers all SPECTRA models: SPECTRA X-YYY-ZZ or SPECTRAX X-YYY-ZZ. X denotes the number of colors, YYY denotes a unique customer code and ZZ denotes option and revision. The first Z variable indicates a standard SPECTRA if it is blank or a color mix or simultaneous output SPECTRA (or SPECTRA X) if it is an "S". The second Z denotes the revision level. Any reference to "SPECTRA" in this manual shall apply to all SPECTRA models unless noted otherwise.

The light sources within the SPECTRA are controlled by software; either via a serial interface (RS-232 or USB) to a computer running a Lumencor supplied GUI or via a TTL interface to a computer running a third party microscopy software application. The user can enable or disable each source independently and change the intensity of each source independently. The only manual control is a power switch on the rear panel to turn on/off the power into the unit. A green power indicator on the rear cover is lit ("ON") when the power supply is connected to the SPECTRA and the power switch is in the on position.

2. Precautions and Warnings {Précautions et mises en garde}

A few simple practices will ensure trouble-free operation for the life of the light engine.

Les quelques règles simples suivantes permettront d'assurer un fonctionnement fiable pendant toute la durée de service de la source lumineuse.

Safety Instructions:

Please read and follow all safety instructions provided **BEFORE** using your new SPECTRA. Failure to comply with the safety instructions may result in fire, electrical shock, or personal injury and may damage or impair protection provided by equipment. Please save all safety instructions.

Instructions de sécurité:

Veiller à lire et à respecter toutes les instructions de sécurité fournies **AVANT** d'utiliser le nouveau SPECTRA afin d'écartier les risques d'incendie, de décharge électrique, de blessure corporelle et de possibles dommages ou défaillance de la protection offerte par l'appareil. Conserver toutes les instructions de sécurité.

Safety Definitions {Définitions relatives à la sécurité}:

Warning: Statements identify conditions or practices that could result in personal injury.

Avertissement: déclarations qui identifient des situations ou des pratiques susceptibles d'entraîner des blessures corporelles.

Caution: Statements identify conditions or practices that could result in damage to your equipment.

Attention: déclarations qui identifient des situations ou des pratiques susceptibles d'endommager le matériel.

Safety Items {Mesures de sécurité}:

Warning: DO NOT use an unapproved power supply. The Lumencor supplied external power supply is recommended for use with the SPECTRA light engines. Alternate 24VDC/5A power supplies may be used for the standard SPECTRA (no simultaneous outputs) or alternate 24-30VDC/7.9A power supplies may be used for SPECTRA X and SPECTRA S (simultaneous outputs) but it is imperative that it has output over-current protection, as the power input of the SPECTRA is not fused. The equipment is required to be supplied by a DC power source that has been assessed to meet the requirements of a limited current circuit per clause 9.3 of IEC 61010-1. Connect the AC power cord to a receptacle with a protective safety (earth) ground terminal.

Avertissement : NE PAS utiliser une alimentation électrique non homologuée. Il est conseillé d'utiliser l'alimentation électrique externe fournie par Lumencor avec les sources lumineuses SPECTRA. Il est possible d'utiliser une autre alimentation électrique continue 24 V/5 A avec la source SPECTRA standard (pas de sorties simultanées) ou une autre alimentation électrique continue 24-30 V/7,9 A avec les sources SPECTRA X et SPECTRA S (sorties simultanées), toutefois il est impératif qu'elle présente une protection de sortie contre les surintensités, car l'entrée d'alimentation du SPECTRA ne comporte pas de fusible. Le matériel doit être alimenté par une source d'alimentation continue qui a été déclarée conforme aux critères d'un circuit d'énergie limitée en vertu de la clause 9.3 de CEI 61010-1. Brancher le cordon électrique sur une prise de courant protégée par une borne de terre.



Warning: DO NOT stare into the output of the light engine. The brightness of this light source is higher than most commercial lighting fixtures and is intended to couple directly into a microscope or other bioanalytical instrument.

Avertissement: NE PAS regarder directement la sortie de la source lumineuse. L'intensité lumineuse de cette source est supérieure à celle de la majorité des appareils d'éclairage disponibles dans le commerce et est conçue pour un raccordement direct à un microscope ou autre appareil de bioanalyse.

Caution: DO NOT open the unit. There are no serviceable parts inside and opening the light engine enclosure will void the manufacturer's warranty.

Attention: NE PAS ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable et l'ouverture de son boîtier a pour effet d'annuler la garantie.

Caution: DO NOT connect a video cable to the TTL input enable port. Although the connector might look compatible, this input is not intended to be driven by a video signal.

Attention: NE PAS raccorder un câble vidéo au port d'activation d'entrée TTL. Bien que le connecteur puisse paraître compatible, cette entrée n'est pas conçue pour être contrôlée par un signal vidéo.

Caution: DO NOT set liquids on the light engine. Spilled liquids may damage your light engine.



Attention: NE PAS placer de liquide sur la source lumineuse. Les liquides renversés peuvent endommager la source lumineuse.

Caution: DO NOT drop the light engine. It contains glass optical components that could be damaged or misaligned by the shock produced by a drop onto a hard surface.

Attention: NE PAS laisser tomber la source lumineuse. Elle contient des composants optiques en verre susceptibles d'être endommagés ou désalignés par le choc résultant d'une chute sur une surface dure.

DISCLAIMER: Lumencor shall not be liable for injury to the user or damage to the product resulting from the SPECTRA being used in a way for which it was not intended and in complete disregard for all posted safety precautions and warnings.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Lumencor décline toute responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages au produit résultant d'une utilisation du SPECTRA autre que celle prévue et du mépris total de toutes les mesures de sécurité et mises en garde affichées.

3. Installation and Operating Instructions

The SPECTRA family of light engines all ship with the following list of standard components.

1. SPECTRA light engine, configured with five, six or seven channels (colors). The particular excitation filter configuration within the unit will be noted on a label affixed to the bottom of the unit.
2. A 24V/5A power supply (Lumencor part no. 27-10002) ships with SPECTRA X-YYY- Z and a 28V/7.9A power supply (Lumencor part no. 27-10003) ships with SPECTRA X-YYY-SZ.
3. A 6ft AC power cord for the power supply (for North American customers, Lumencor part no. 29-10002, for UK customers, Lumencor part no. 29-10004 and for European customers, Lumencor part no. 29-10005).
4. A USB-to-RS232 cable (Lumencor part no. 29-10011).

SPECTRA ships with one output adaptor included with the unit. The user may choose from one of the following.

Output Adaptor	Lumencor Part No.
Liquid Light Guide	82-10012
Nikon TI	82-10011
Olympus IX71/81	82-10010
Zeiss x00M	82-10009
Fly-In	82-10013
1mm Quartz Fiber	82-10015

The SPECTRA X has a feature that other SPECTRAs in the product family do not; removable optical excitation filters. There are fixed in the SPECTRA and SPECTRA S. The filters are installed in individual holders which the user can access once the top cover retained by two thumb screws is removed. Refer to the photo below.



SPECTRA X with removable filter holders

When setting the SPECTRA up for use, be sure to place the unit on a hard surface and avoid blocking or restricting airflow at the air inlets or exhaust ports on the enclosure. Restricting the airflow will cause the unit to operate at elevated temperatures and will result in decreased product life and/or premature failure.

Position the unit in such an orientation that allows unrestricted access to the DC power connector. In an emergency, you may need to disconnect power to the unit quickly.

The SPECTRA can either be controlled by a Lumencor supplied GUI via a RS-232 port, by the Lumencor Remote Control Accessory (RCA) via the RS-232 port or by a 3rd party laboratory software program via the TTL port. The GUI provides a quick and easy way to control your new light engine. You will have the ability to turn each source within the unit on/off, adjust the power of each source independently from off to full power, switch between the GREEN and YELLOW excitation filters and also cycle through all sources automatically at a frequency chosen by the user. Refer to the photo below of the rear panel for the location of the various connectors.



Rear Panel of SPECTRA light engine



3.1 GUI Installations

Installation instructions follow for GUI control of the SPECTRA. Connectivity between the computer and your SPECTRA can be accomplished one of two ways; either using a RS-232 straight-thru cable or using the optional USB-to-RS232 adapter cable. Both methods are covered below.

GUI Installation and Operating Instructions (using RS-232 straight-thru cable)

Download the zip file for the SPECTRA GUI from http://www.lumencor.com/software_control.html.

Unzip the file and run setup.exe to install the SPECTRA GUI.

Connect the RS-232 cable between the PC and the SPECTRA.

Connect the power supply to the SPECTRA.

Toggle the power switch on the rear panel to the ON "1" position. The green LED next to the switch should light.

Run the GUI by going to the Program Menu and selecting LLE Controller.

In the GUI, select "COMPUTER" mode.

In the COM pulldown menu, select the COM port assigned to serial communications. Generally this is COM1. [If you are unsure which one that is then go to Control Panel, then System, then the Hardware tab. Select Device Manager to see the hardware profile. Expand "PORTS (COM & LPT)" to see which COM port is assigned to the "Communications Port" and select that port in the GUI.] The PC should now have control of each color channel in the SPECTRA. You will have the ability to turn each color ON or OFF and adjust the intensity of each individually. THIS STEP IS REQUIRED TO RE-ESTABLISH THE COMMUNICATION LINK WHENEVER THE SPECTRA LIGHT ENGINE IS POWER CYCLED OR WHENEVER THE GUI IS STARTED.

GUI Installation and Operating Instructions (using USB-to-RS232 cable)

Download the zip file for the SPECTRA GUI from http://www.lumencor.com/software_control.html.

Unzip the file and run setup.exe to install the SPECTRA GUI.

Connect the USB-to-RS-232 cable between the PC and the SPECTRA.

Connect the power supply to the SPECTRA.

Toggle the power switch on the rear panel to the ON "1" position. The green LED next to the switch should light.

Run the GUI by going to the Program Menu and selecting LLE Controller.

In the GUI, select "COMPUTER" mode.

In the COM pulldown menu, select the COM port assigned to USB-to-Serial communications. [If you are unsure which one is correct then go to Control Panel, then System, then the Hardware tab. Select Device Manager to see the hardware profile. Expand "PORTS (COM & LPT)" to see which COM port is assigned to the "USB-to-Serial Comm Port" and select that port in the GUI.] The PC should now have control of each color channel in the



SPECTRA. You will have the ability to turn each color ON or OFF and adjust the intensity of each individually. THIS STEP IS REQUIRED TO RE-ESTABLISH THE COMMUNICATION LINK WHENEVER THE SPECTRA LIGHT ENGINE IS POWER CYCLED OR WHENEVER THE GUI IS STARTED.

3.2 TTL Interface


The purpose of the TTL Interface is to provide the end-user with a more predictable means (in terms of timing) of enabling/disabling each individual light source in the LE. This is accomplished via the parallel port on a PC. Merely Connect the Lumencor supplied TTL cable between the PC and the TTL port on the rear of the SPECTRA. The integration and set up of the 3rd party laboratory software is very application specific and beyond the scope of this document. For programming information, visit the Lumencor website at http://www.lumencor.com/software_control.html and download the SPECTRA TTL Interface Specification. Contact support if you need more assistance.

3.3 Monitor Connector (Dosimeter)

This connector provides a means for monitoring the output of the internal Dosimeter that is measuring the relative power output of the selected light source in the unit. The connector accepts a standard BNC connector. Lumencor does not supply a cable.

4. Spectral Output

The spectra of the most commonly requested light engine outputs (colored bands) are shown below along with a 75W Xenon trace (grey) and a 120W metal halide lamp output (brown). Other outputs are available upon request.

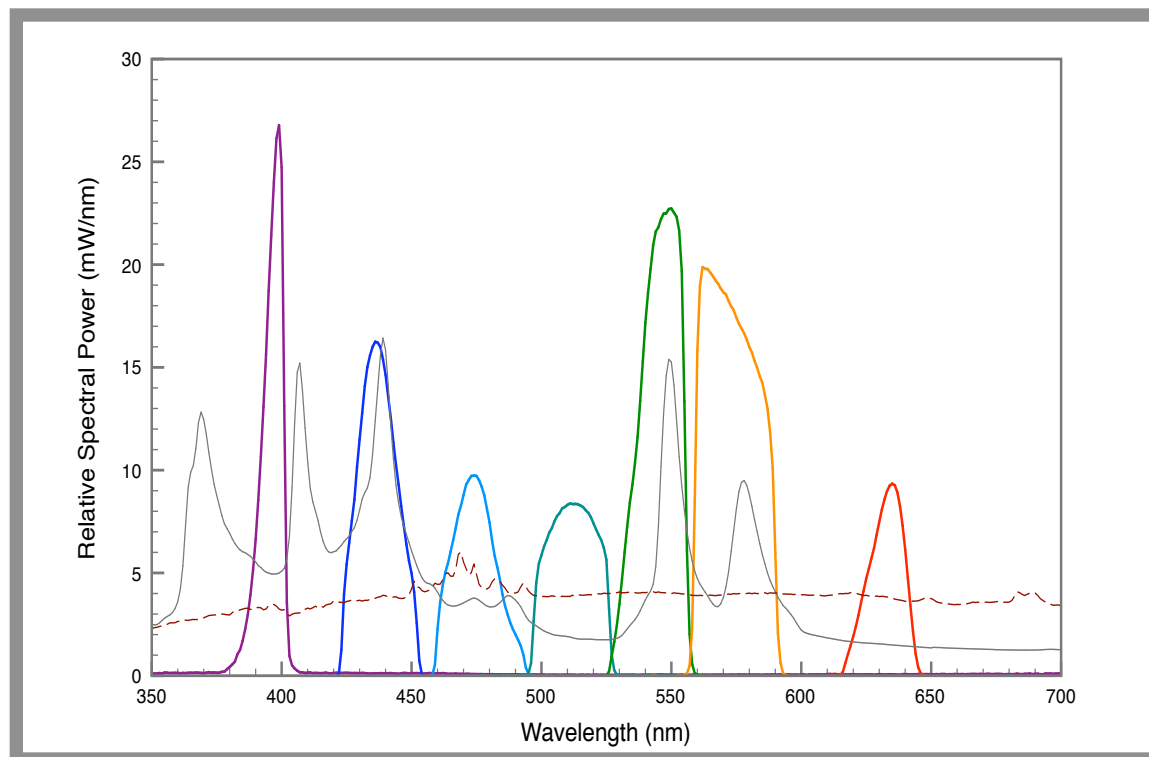

5. Routine Maintenance and Trouble Shooting

Remove any built-up dust or accumulation on the air intake ports. A vacuum may be used to remove debris so that a steady supply of air is available for cooling. It is recommended that these dust-filters be cleaned by a gentle suction device at least every 6 months and more often in dusty or smoke-filled environments.

There are no user-replaceable components or sub-assemblies in SPECTRA.

6. Customer Support

T: 503.505.6985

E: les.decker@lumencor.com

W: http://www.lumencor.com/support/software_control

M: Lumencor, Inc., 14964 NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR 97006 U.S.A.



7. Product Specifications

The SPECTRA must be operated and stored within the environmental conditions specified.

Specification	Detail
Temperature	
Operating	32 to 95° F (0 to 35° C)
Non-operating	-4 to 158° F (-20 to 70° C)
Humidity	
Operating and non-operating	0 to 80% relative humidity, non-condensing
Altitude	
Operating	0 to 10,000 feet (3,048 meters)
Non-operating	0 to 20,000 feet (6,096 meters)
Dimensions (LxWxH)	11.0 x 7.0 x 4.0 in / 27.9 x 17.8 x 10.2 cm
Weight	9 lb / 4.1 kg
Lifetime	> 10,000 hr
Input Power Requirements	24VDC / 5A (SPECTRA X-YYY- Z), 28-30VDC / 7.9A (SPECTRA X-YYY-SZ or SPECTRAX X-YYY-SZ)
Warm-up Period	Less than 1 minute
Protection	IP Rating of X0
Sound Level	Sound Level at 1 meter < 65db(A)
Connectivity	RS-232, USB, TTL
Warranty	36 months parts and labor

8. Connectors

8.1 TTL Input Connector

This connector is used to enable/disable each source and select between the GRN/YEL excitation filter.

Pins	Definition	DC Characteristics
1, 2, 3, 11, 12, 13	Red, Green, Cyan, Teal, Blue, UV respectively - low true enables	VCC = 5.0V, V _{ilow} (max) = 1.5V, V _{ihigh} (min) = 3.3V, I _{ilow} = 0.5mA, I _{ihigh} = 1.0μA
15 - Green/Yellow	Excitation Filter Select, V _{in} = H => Green, V _{in} = L => Yellow	VCC = 5.0V, V _{ilow} (max) = 1.5V, V _{ihigh} (min) = 3.3V, I _{ilow} = 0.5mA, I _{ihigh} = 1.0μA
6, 7, 8, 10	Gnd	
4, 9, 14	N/C	

DB15HD connector Pin Definitions

8.2 RS-232 Connector

This port conforms to standard RS-232 Interface Protocol.

Pins	Definition	DC Characteristics
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	DCD, RXD, TXD, DTR, D3R, RTS, CTS	VCC = 5.0V, V _{ilow} (max) = 0.8V, V _{ihigh} (min) = 2.4V, I _{ilow} = 0.5mA, I _{ihigh} = 1.0μA
5	Gnd	
9	N/C	

DB9 Connector Pin Definitions

8.3 Dosimeter Connector (Monitor)

This connector is a standard BNC connector located on the rear panel. It is used to read the internal dosimeter by connecting to a scope or frequency counter. It outputs a square wave, 0-5V, frequency is proportional to the power of the light being measured.



9. Declaration of Conformance

Manufacturer: Lumencor, Inc.
14964 NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR 97006 USA

We declare under our sole responsibility that the SPECTRA Light Engine conforms to the following directives and norms:

EMC directive 2004/108/EC
2006/95/EC
CB Scheme
CE Declaration of Conformity
TUV NRTL Listing
TUV Canadian Listing
TUV European License

10. Warranty

The SPECTRA family of light engines is backed by a 36 month warranty.